

ÉCHOGRAPHE
T-Lite PRO



**L'ECHOGRAPHIE,
SANS LIMITE.**



SONOSCANNER
Premium Diagnostic Ultrasound



www.sonoscanner.com

CONÇU POUR VOUS OFFRIR UNE PRÉCISION DE DIAGNOSTIC
INÉGALÉE, SANS LIMITE.

LE T-LITE PRO

Grâce à la qualité inédite de ses images et l'étendue de ses fonctionnalités vous disposez d'un échographe ultraperformant, toujours à portée de main. Sa simplicité d'utilisation et son allumage quasi-immédiat vous assurent une prise en charge de vos patients rapide et sûre.

Voyez, sans limite.

CONCENTREZ-VOUS SUR LE DIAGNOSTIC,
LAISSEZ LE T-LITE PRO VOUS DISPENSER LES MEILLEURES IMAGES.



ALLUMAGE RAPIDE
(MOINS DE 12 SEC)



ÉCRAN TACTILE
HD 10" LED



TRÈS GRANDE
AUTONOMIE
(3 HEURES)



DIMENSIONS :
15 X 17 X 2 CM



POIDS :
1 KILO

Images Rétina+

Facilitez vos diagnostics, même les plus difficiles, grâce au renforcement des différenciations de tissus et du contraste ! Un traitement d'image adaptatif exclusif Sonoscanner, issu de 20 ans de R&D en traitement d'image.

Ecran OSD Lightning Touch

Visualisez la plus belle image, dans toutes les conditions, grâce à l'écran optimisé full HD, 1100+ Lumen.

Cadence d'acquisition très élevée

Le processeur dernière génération *Beamformer 820Pro 10nm* intégré au T-Lite PRO vous assure une cadence d'images Haute Fréquence 3 fois plus élevée et une image temps réel augmentée.

Technologie de sonde ActiveProbe unique

Les sondes Full HD ultra légères du T-Lite PRO intègrent une technologie exclusive d'optimisation de l'image, reconnue par 3 brevets Sonoscanner. Vous profitez d'une sonde plus légère, plus compacte offrant une ergonomie inégalée.

TOUTES LES FONCTIONNALITÉS QUE VOUS ATTENDIEZ

Full Doppler Package

Disposez de tous les modes Doppler sur votre T-Lite PRO :

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> CFM | <input checked="" type="checkbox"/> PW |
| <input checked="" type="checkbox"/> PDI | <input checked="" type="checkbox"/> CW |
| <input checked="" type="checkbox"/> TDI | <input checked="" type="checkbox"/> TCD |

Ayez toujours dans votre poche, un échographe complet pour réaliser tous vos diagnostics.

Rapport patient automatisé

Automatisation de l'édition de rapports patients grâce au Cloud privé et à une banque de rapports alimentée par nos médecins partenaires.

Gagnez du temps dans votre journée de consultation et concentrez-vous sur vos diagnostics patients !

ENCORE PLUS POLYVALENT

Pour couvrir l'ensemble des applications médicales, le T-Lite PRO dispose de toutes les sondes.

Des packs pensés pour chaque spécialité intégrant les modes, les mesures et les préréglages dont vous avez besoin.



SCANNEZ SANS LIMITE

Le T-Lite PRO est conçu pour vous accompagner et s'adapter à vos besoins.

Avec ses trois heures d'autonomie, son mode de fonctionnement en charge et ses modes *Nomades* et *Performance*, le T-Lite PRO est toujours prêt à vous offrir le maximum de ses capacités.



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D'ÉCHOGRAPHES ULTRAPORTABLES AUX PERFORMANCES

RÉVOLUTIONNAIRES

Nous avons conçu l'échographe ultraportable T-Lite PRO avec les plus grands médecins spécialistes de chaque domaine, pour vous offrir la qualité d'image, les fonctionnalités et les mesures qu'exige votre pratique quotidienne.

Alliant images HD, tous les Doppler, facilité d'utilisation et mesures automatiques, le T-Lite PRO est un outil unique de diagnostic avancé.

L'image de l'échographe Sonoscanner est exceptionnelle. Il nous permet de prolonger l'examen clinique directement au lit du malade.

Pr. Nicolas Thiounn

UROLOGUE
Hôpital Georges Pompidou, Paris

Je ne pourrais plus me passer de mon échographe Sonoscanner dans ma pratique quotidienne. L'échographie apporte un support essentiel dans de nombreuses indications courantes et permet de faire avancer le diagnostic.


Dr Yannick Lebre

MÉDECIN URGENTISTE
Genève

Nous avons équipé tous nos véhicules SMUR d'échographes ultraportables Sonoscanner. Leur format ultraportable est parfaitement adapté et leur écran permet une belle visualisation de l'image. Il s'allume en quelques secondes, nous permettant ainsi de commencer immédiatement l'examen auprès du patient.

Dr Nathalie Assez

MÉDECIN URGENTISTE
CHRU de Lille

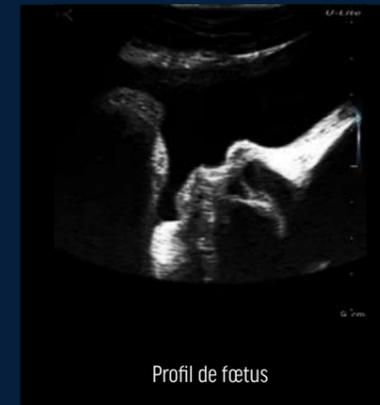

Profil de fœtus




Fœtus



Cordon ombilical



Thyroïde

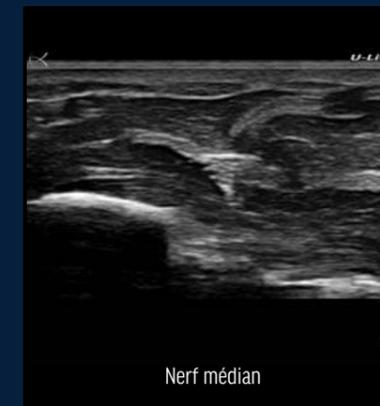

Nerf médian




Muscle et tendon




M-Mode




Cœur : Doppler couleur

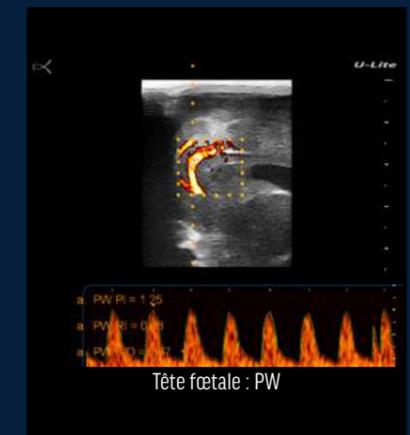


Tête fœtale : PW

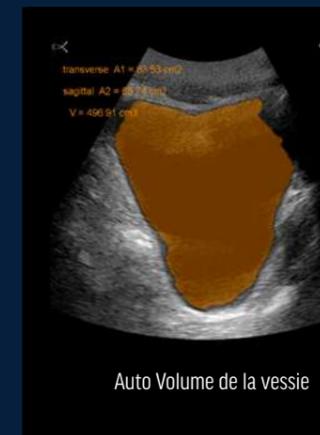

Auto Volume de la vessie

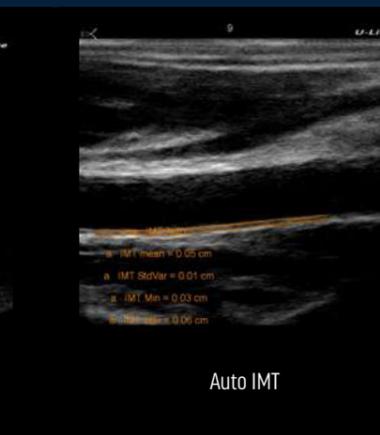

Auto IMT

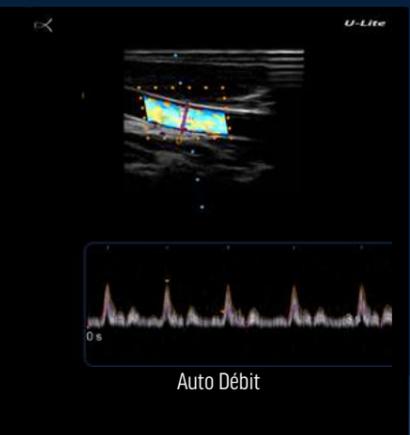

Auto Débit

OPTIONS AVANCÉES



DES SONDES

POUR TOUTES LES PRATIQUES

Le T-Lite PRO est le seul échographe de sa catégorie à proposer 11 sondes électroniques interchangeables grâce à un système de connecteur de sonde unique.

Choisissez les sondes adaptées à votre pratique parmi notre gamme de sondes ultralégères à larges bandes, donnant des images très haute définition, avec une très grande sensibilité Doppler et un vaste choix d'applications cliniques.

| SONDES PREMIUM | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sonde linéaire Full HD 5 cm haute fréquence | 6 - 18 MHz | Parties molles, Vasculaire, Anesthésie, MSK, Médecine du sport, Pédiatrie |
|  | Sonde convexe HD single crystal | 1,5 - 6 MHz | Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences |
| SONDES ADVANCED | | | |
|  | Sonde linéaire HD très haute fréquence | 10 - 18 MHz | Parties molles, Vasculaire, Anesthésie, MSK, Médecine du sport, Pédiatrie |
|  | Sonde convexe HD | 2 - 5 MHz | Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences |
| SONDES ACCESS | | | |
|  | Sonde linéaire haute fréquence | 5 - 12,5 MHz | Parties molles, Vasculaire, Anesthésie, MSK, Médecine du sport, Pédiatrie |
|  | Sonde convexe | 2 - 5 MHz | Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences |
| SONDES SPECIALTY | | | |
|  | Sonde endocavitaire | 4 - 9 MHz | Gynécologie, Obstétrique, Urologie |
|  | Sonde sectorielle Phased Array | 1,5 - 5 MHz | Cardiologie, Urgences, Transcranien, Pédiatrie |
|  | Sonde convexe haute fréquence | 4 - 10 MHz | Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences |
|  | Sonde club de golf | 10 - 18 MHz | MSK, Médecine du sport, Anesthésie, Pédiatrie |
|  | Sonde micro convexe | 4 - 9 MHz | Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences, Pédiatrie |
|  | Connecteur EasySwitch | Connecteur de sonde breveté adapté à un usage nomade en supprimant les câbles de sondes inutiles. Où que vous soyez, connectez votre sonde, changez en un clic, scannez. | |

Sonoscanner se réserve le droit de changer à tout moment et sans avertissement préalable, toute spécification du produit décrit dans cette brochure. Veuillez contacter votre représentant Sonoscano pour obtenir une liste complète de sondes et les informations les plus à jour sur les produits.

SONOSCANNER

SUPPORT, SERVICE & FORMATION

En complément de votre échographe, Sonoscano vous propose un large éventail de services pour vous permettre de vous concentrer sur votre pratique, en toute sérénité.



Parcours de formation sur mesure

L'Académie Sonoscano vous offre une formation personnalisée, à votre rythme grâce à un site de formation en ligne proposant plus de 80 h de formations dispensées par des experts et des ateliers présentiels pour vous former auprès de médecins.



Cloud dédié sécurisé

Grâce au Cloud privé Sonoreplay :

- Éditez vos rapports automatiquement
- Gérez vos patients en ligne
- Stockez vos images et vidéos de manière totalement sécurisée
- Accédez à vos données, où que vous soyez



Accompagnement à la prise en main

Nos ingénieurs sont présents pour l'utilisation de votre échographe et vous forment à son utilisation. En une heure, votre échographe est connecté à vos outils et vous êtes prêt à l'utiliser.



Service client

Les ingénieurs du service client sont disponibles pour répondre à toutes vos questions, en termes de paramétrages, de mise en œuvre, d'utilisation... Ils sont vos partenaires au quotidien, par mail et par téléphone.



Maintenance et entretien

Nous réalisons régulièrement des opérations de maintenance à distance afin de garantir la performance et la longévité de votre échographe. Des mises à jour logicielles sont effectuées, à distance, afin de vous faire bénéficier régulièrement des toutes dernières innovations technologiques Sonoscano.



Offre Service +

Notre offre service + vous garantit une utilisation efficace de votre échographe. Les formations téléphoniques dispensées par nos ingénieurs vous permettent de profiter pleinement des capacités de votre échographe et le service de réparation rapide ou de prêt vous assure de disposer toujours d'un échographe performant, même en cas de bris.

LA PASSION DE L'ÉCHOGRAPHIE



T-Lite PRO brochure rev1 - Novembre 2023

S'appuyant sur des dizaines d'années de recherche et développement ainsi que sur l'expérience unique de ses fondateurs en imagerie ultrasons (Bruno Richard, Docteur en Médecine et Physique, inventeur de la sonde convexe et Bruno Robert, Docteur en Physique), Sonoscanner commercialise des échographes reconnus pour leur qualité exceptionnelle, en termes de qualité d'images, de fonctionnalités (Doppler, IA Ready, Rapports automatisés, fonctionnement Cloud...) et de compacité.

En complément d'une gamme d'échographes performants et adaptés aux besoins de chaque médecin, Sonoscanner se distingue par un large éventail de services, un véritable accompagnement quotidien, un service client composé d'experts impliqués et réactifs et un parcours de formation sur-mesure.

Les échographes Sonoscanner sont vendus en France et dans plus de 45 pays. Actuellement, plus de 4 400 médecins pratiquent l'échographie quotidiennement grâce à Sonoscanner. Les échographes Sonoscanner ont été choisis dans le cadre de références prestigieuses (Agence spatiale européenne et Centre National des Études Spatiales, Armées Françaises pour les déploiements opérationnels). Ils sont mis en œuvre par les services d'urgences et les SMUR ainsi que par des spécialistes et de nombreux médecins généralistes qui veulent élargir leur domaine d'investigation.

SONOSCANNER, LE FABRICANT FRANÇAIS D'ÉCHOGRAPHES, LEADER EN ÉCHOGRAPHIE CLINIQUE

Grâce à ses innovations technologiques majeures,
à la performance de ses échographes
et à la qualité de ses services.



SONOSCANNER
Premium Diagnostic Ultrasound

6 rue André Voguet
75013 Paris - France
+33 9 54 97 15 57
contact@sonoscanner.com

USA
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE, 19958