

ÉCHOGRAPHE *U-Lite PRO*



**LA RÉVOLUTION
DE L'ÉCHOGRAPHIE**
DANS VOTRE POCHE



SONOSCANNER
Premium Diagnostic Ultrasound



www.sonoscanner.com

DÉCOUVREZ LA RÉVOLUTION EN ÉCHOGRAPHIE ULTRAPORTABLE :

LE U-LITE PRO

Grâce à la qualité inédite de ses images et l'étendue de ses fonctionnalités vous disposez d'un échographe ultraperformant, toujours à portée de main. Sa simplicité d'utilisation et son allumage quasi-immédiat vous assurent une prise en charge de vos patients rapide et sûre.

Allumez, scannez, diagnostiquez.

**BÉNÉFICIEZ D'UNE QUALITÉ D'IMAGE INÉGALÉE
POUR UN ÉCHOGRAPHE ULTRAPORTABLE**



POIDS :
600 GRAMMES



DIMENSIONS :
18 X 15 X 2 CM



ÉCRAN TACTILE
HD 7" LED



ALLUMAGE RAPIDE
(MOINS DE 12 SEC)

Images Rétina+

Facilitez vos diagnostics, même les plus difficiles, grâce au renforcement des différenciations de tissus et du contraste ! Un traitement d'image adaptatif exclusif Sonoscanner, issu de 20 ans de R&D en traitement d'image.

Ecran OSD Lightning

Visualisez la plus belle image, dans toutes les conditions, grâce à l'écran optimisé full HD, 1100+ Lumen.

Cadence d'acquisition très élevée

Le processeur dernière génération *Beamformer 820Pro 10nm* intégré au U-Lite PRO vous assure une cadence d'images Haute Fréquence 3 fois plus élevée et une image temps réel augmentée.

Technologie de sonde ActiveProbe unique

Les sondes Full HD ultra légères du U-Lite PRO intègrent une technologie exclusive d'optimisation de l'image, reconnue par 3 brevets Sonoscanner. Vous profitez d'une sonde plus légère, plus compacte offrant une ergonomie inégalée.



UN ÉCHOGRAPHE INTÉGRANT TOUTES LES FONCTIONNALITÉS NÉCESSAIRES À VOTRE PRATIQUE

Full Doppler Package

Disposez de tous les modes Doppler sur votre U-Lite PRO :

- | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> CFM | <input checked="" type="checkbox"/> TDI | <input checked="" type="checkbox"/> CW |
| <input checked="" type="checkbox"/> PDI | <input checked="" type="checkbox"/> PW | <input checked="" type="checkbox"/> TCD |

Ayez toujours, dans votre poche, un échographe complet pour réaliser tous vos diagnostics.



PROFITEZ DE LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION DU U-LITE PRO POUR VOUS CONCENTRER SUR VOTRE PRATIQUE

Dock PRO

En un clip, votre échographe se raccorde à votre réseau informatique : ordinateur, chargeur, réseau internet, clés USB.



Profitez de la mobilité de votre U-Lite PRO et d'un raccordement automatique à votre environnement de travail, de retour à votre bureau.

Rapport patient automatisé

Automatisation de l'édition de rapports patients grâce au Cloud privé et à une banque de rapports alimentés par nos médecins partenaires. Gagnez du temps dans votre journée de consultation et concentrez-vous sur vos diagnostics patients !

AVEC LE U-LITE PRO, PROFITEZ D'UN ÉCHOGRAPHE ULTRAPORTABLE COMPLÈTEMENT SUR-MESURE

Toutes les sondes disponibles


Pour couvrir l'ensemble des applications médicales, le U-Lite PRO dispose de toutes les sondes.



Option My U-Lite

Grâce au pack My U-Lite, personnalisez votre échographe et gardez toujours un œil dessus.

- Localisation GPS : par puce embarquée. Localisez votre U-Lite en cas de perte ou de vol, n'égarez jamais votre échographe.
- Personnalisation de votre U-Lite PRO par gravure de votre nom sur la coque.

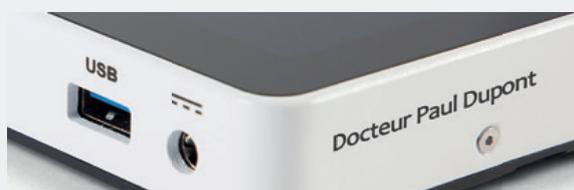

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D'ÉCHOGRAPHES ULTRAPORTABLES AUX PERFORMANCES

RÉVOLUTIONNAIRES

Nous avons conçu l'échographe ultraportable U-Lite PRO avec les plus grands médecins spécialistes de chaque domaine, pour vous offrir la qualité d'image, les fonctionnalités et les mesures qu'exige votre pratique quotidienne.

Alliant images HD, tous les Doppler, facilité d'utilisation et mesures automatiques, le U-Lite PRO est un outil unique de diagnostic avancé.



Je ne pourrais plus me passer de mon échographe U-Lite Sonoscanner dans ma pratique quotidienne. L'échographie apporte un support essentiel dans de nombreuses indications courantes et permet de faire avancer le diagnostic.

Dr Yannick Lebret

MÉDECIN URGENTISTE
Genève

L'image de l'échographe ultraportable Sonoscanner est exceptionnelle. Il nous permet de prolonger l'examen clinique directement au lit du malade.


Pr. Nicolas Thiounn

UROLOGUE
Hôpital Georges Pompidou, Paris

Nous avons équipé tous nos véhicules SMUR d'échographes ultraportables Sonoscanner. Leur format ultraportable est parfaitement adapté et leur écran permet une belle visualisation de l'image. Il s'allume en quelques secondes, nous permettant ainsi de commencer immédiatement l'examen auprès du patient.

Dr Nathalie Assez

MÉDECIN URGENTISTE
CHRU de Lille

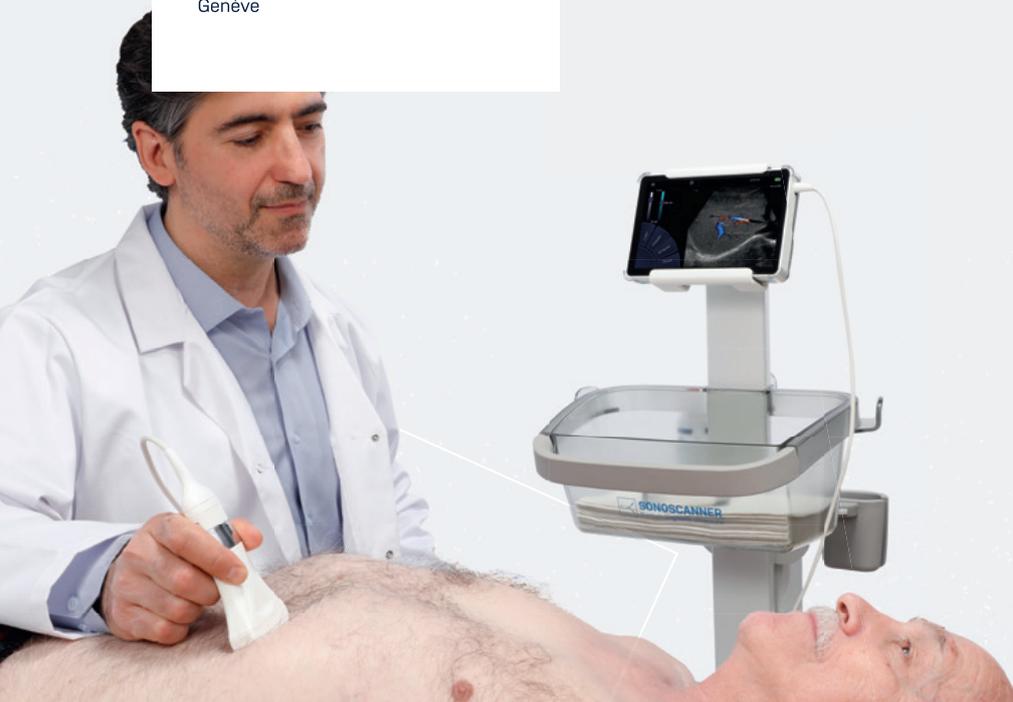




Profil de fœtus



Fœtus



Cordon ombilical

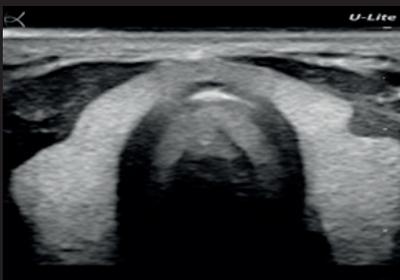


Thyroïde




Nerf médian




Muscle et tendon

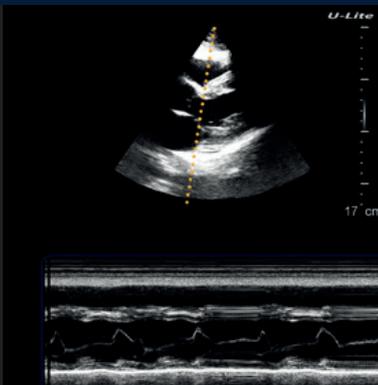

M-Mode

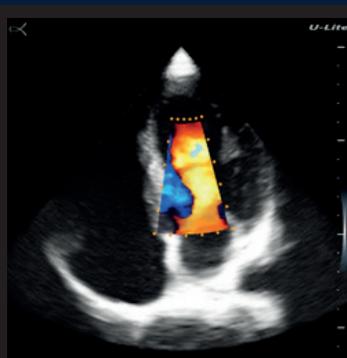

Cœur : Doppler couleur

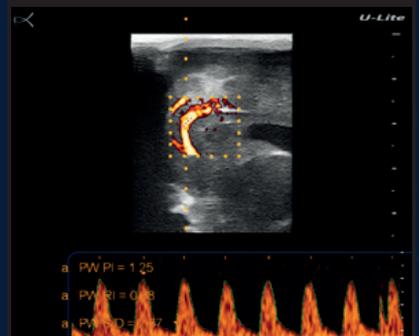


Tête fœtale : PW



Auto Volume de la vessie



Auto IMT

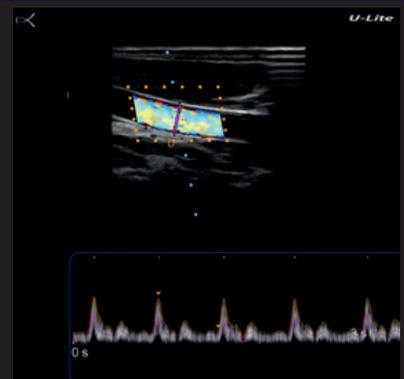

Auto Débit

OPTIONS AVANCÉES

DES SONDES

POUR TOUTES LES PRATIQUES

Le U-Lite PRO est le seul échographe à proposer 11 sondes électroniques interchangeables grâce à un système de connecteur de sonde unique.

Choisissez les sondes adaptées à votre pratique parmi notre gamme de sondes ultralégères à larges bandes, donnant des images très haute définition, avec une très grande sensibilité Doppler et un vaste choix d'applications cliniques.

SONDES PREMIUM			
	Sonde linéaire Full HD 5 cm haute fréquence	6 - 18 MHz	Parties molles, Vasculaire, Anesthésie, MSK, Médecine du sport, Pédiatrie
	Sonde convexe HD single crystal	1,5 - 6 MHz	Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences
SONDES ADVANCED			
	Sonde linéaire HD très haute fréquence	10 - 18 MHz	Parties molles, Vasculaire, Anesthésie, MSK, Médecine du sport, Pédiatrie
	Sonde convexe HD	2 - 5 MHz	Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences
SONDES ACCESS			
	Sonde linéaire haute fréquence	5 - 12,5 MHz	Parties molles, Vasculaire, Anesthésie, MSK, Médecine du sport, Pédiatrie
	Sonde convexe	2 - 5 MHz	Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences
SONDES SPECIALTY			
	Sonde endocavitaire	4 - 9 MHz	Gynécologie, Obstétrique, Urologie
	Sonde sectorielle Phased Array	1,5 - 5 MHz	Cardiologie, Urgences, Transcranien, Pédiatrie
	Sonde convexe haute fréquence	4 - 10 MHz	Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences
	Sonde club de golf	10 - 18 Mhz	MSK, Médecine du sport, Anesthésie, Pédiatrie
	Sonde micro convexe	4 - 9 MHz	Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences, Pédiatrie
	Connecteur EasySwitch	Connecteur de sonde breveté adapté à un usage nomade en supprimant les câbles de sondes inutiles. Où que vous soyez, connectez votre sonde, changez en un clic, scannez.	

SONOSCANNER

SUPPORT, SERVICE & FORMATION

En complément de votre échographe, Sonoscanner vous propose un large éventail de services pour vous permettre de vous concentrer sur votre pratique, en toute sérénité.



Parcours de formation sur mesure

L'académie Sonoscanner vous offre une formation personnalisée, à votre rythme grâce à un site de formation en ligne proposant plus de 80 h de formations dispensées par des experts et des ateliers présentiels pour vous former auprès de médecins.



Cloud dédié sécurisé

Grâce au Cloud privé Sonoreplay :

- Éditez vos rapports automatiquement
- Gérez vos patients en ligne
- Stockez vos images et vidéos de manière totalement sécurisée
- Accédez à vos données, où que vous soyez



Accompagnement à la prise en main

Nos ingénieurs sont présents pour l'utilisation de votre échographe et vous forment à son utilisation. En une heure, votre échographe est connecté à vos outils et vous êtes prêt à l'utiliser.



Service client

Les ingénieurs du service client sont disponibles pour répondre à toutes vos questions, en termes de paramétrages, de mise en œuvre, d'utilisation...

Ils sont vos partenaires au quotidien, par mail et par téléphone.



Maintenance et entretien

Nous réalisons régulièrement des opérations de maintenance à distance afin de garantir la performance et la longévité de votre échographe. Des mises à jour logicielles sont effectuées, à distance, afin de vous faire bénéficier régulièrement des toutes dernières innovations technologiques Sonoscanner.



Offre Service +

Notre offre service + vous garantit une utilisation efficace de votre échographe. Les formations téléphoniques dispensées par nos ingénieurs vous permettent de profiter pleinement des capacités de votre échographe et le service de réparation rapide ou de prêt vous assure de disposer toujours d'un échographe performant, même en cas de bris.



My U-Lite

Grâce au pack *My U-Lite*, personnalisez votre échographe et gardez toujours un œil dessus.

- Localisation GPS : par puce embarquée. Localisez votre U-Lite en cas de perte ou de vol, n'égarez jamais votre échographe.
- Personnalisation de votre U-Lite PRO par gravure de votre nom sur la coque.

LA PASSION DE L'ÉCHOGRAPHIE



U-Lite PRO brochure rev1 – Avril 2023

S'appuyant sur des dizaines d'années de recherche et développement ainsi que sur l'expérience unique de ses fondateurs en imagerie ultrasons (Bruno Richard, Docteur en Médecine et Physique, inventeur de la sonde convexe et Bruno Robert, Docteur en Physique), Sonoscanner commercialise des échographes reconnus pour leur qualité exceptionnelle, en termes de qualité d'images, de fonctionnalités (Doppler, IA Ready, Rapports automatisés, fonctionnement Cloud...) et de compacité.

En complément d'une gamme d'échographes performants et adaptés aux besoins de chaque médecin, Sonoscanner se distingue par un large éventail de services, un véritable accompagnement quotidien, un service client composé d'experts impliqués et réactifs et un parcours de formation sur-mesure.

Les échographes Sonoscanner sont vendus en France et dans plus de 45 pays. Actuellement, plus de 4 400 médecins pratiquent l'échographie quotidiennement grâce à Sonoscanner. Les échographes Sonoscanner ont été choisis dans le cadre de références prestigieuses (Agence spatiale européenne et Centre National des Études Spatiales, Armées Françaises pour les déploiements opérationnels). Ils sont mis en œuvre par les services d'urgences et les SMUR ainsi que par des spécialistes et de nombreux médecins généralistes qui veulent élargir leur domaine d'investigation.

**SONOSCANNER,
LE FABRICANT FRANÇAIS
D'ÉCHOGRAPHES, LEADER
EN ÉCHOGRAPHIE CLINIQUE**

Grâce à ses innovations technologiques majeures,
à la performance de ses échographes
et à la qualité de ses services.



SONOSCANNER
Premium Diagnostic Ultrasound

6 rue André Voguet
75013 Paris - France
+33 9 54 97 15 57
contact@sonoscanner.com

USA
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE, 19958